

高质量脑电 信号解决方案

生理电诊断、监测、科研



BESDATA
柏德医疗

BESDATA® 脑电帽

- 高精度脑电电极材料：
镀金、镀银、镀氯化银、镀氯化银烧结电极等
- 采用国际标准10%-20%比例电极位置安放系统 可定制化
帽子尺寸和电极位置
- 20导、32导、64导、128导脑电监测帽
快速，舒适，精确的脑电测量
- 精心定制的弹性帽
从新生儿到成人，7种尺寸：
7种颜色：● ● ● ● ● ● ●
- 通过转接头，可与不同型号脑电监测
仪器兼容



脑电帽应用

临床用脑电帽

弹性布料；软性舒适硅胶电极固定圈；经济型电极

睡眠式脑电帽


软式平整硅胶固定圈，使电极与头皮可以长时间接触，没有不适应感，不会感觉头皮疼痛。因此，睡眠式脑电帽非常适合于长程（超过12小时）脑电监测，广泛应用于EEG/ERP检查、监测。

科研型脑电帽


标准脑电帽：32导和64导；128导定制脑电帽；可兼容不同型号的放大器

点位标准

20导脑电帽点位示意图

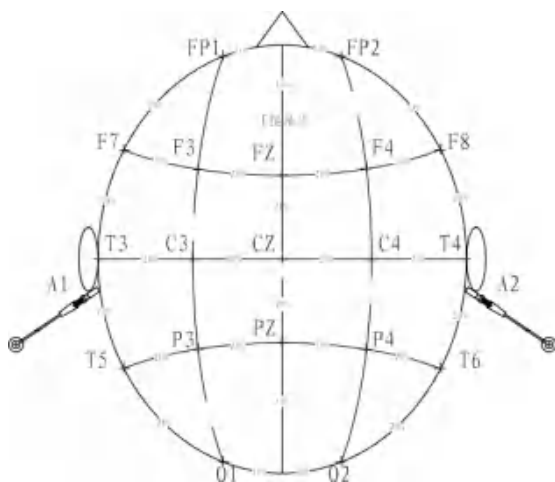

32/64导脑电帽点位示意图

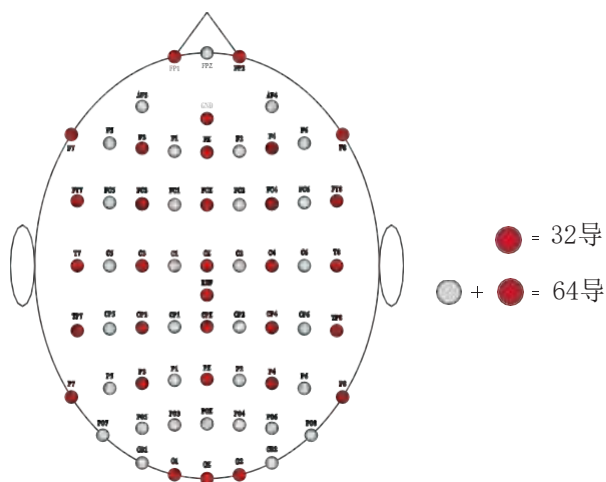


脑电电极

重复使用烧结电极

均匀混合的银-氯化银粉末压缩烧结式电极，传输信号稳定、无损

- 基本无极化现象
- 可重复使用，电极盘面磨损不影响性能
- 更少噪音（低频）
- 直流偏移和电位偏移小，电极阻抗小

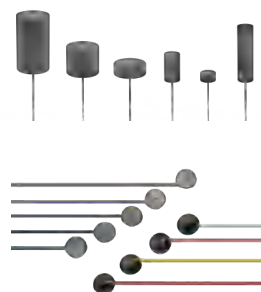

镀金/银/氯化银电极

一次性镀氯化银电极

ABS基底镀银-氯化银



医用导电膏

导电膏（脑电）

- 用于粘连电极和脑电被测者的头皮
- 与皮肤黏贴性好，电极固定牢靠
- 保水护肤成分，体验舒适
- 水溶、易清洗，不染色
- 规格：114g/瓶，228g/瓶



医用导电膏

导电胶（脑电、心电、除颤）

- 导电性能优异，能有效、快速、均匀的传递电流
- 可直接用在电极片也可用在皮肤上，是电极片与皮肤之间有效的中间体
- 黏稠性适宜，易抽取、易涂抹，方便用于脑电帽、心电、除颤电极
- 易擦除，易清洗；稳定性好，不用冰箱保存
- 规格：100g/支，500g/瓶



深圳柏德医疗科技有限公司

地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区丹梓大道3179号新南天工业园2栋503

电话：0755-84416070

传真：0755-23039200

邮箱：support@besdatatech.com

网址：www.besdatatech.cn

